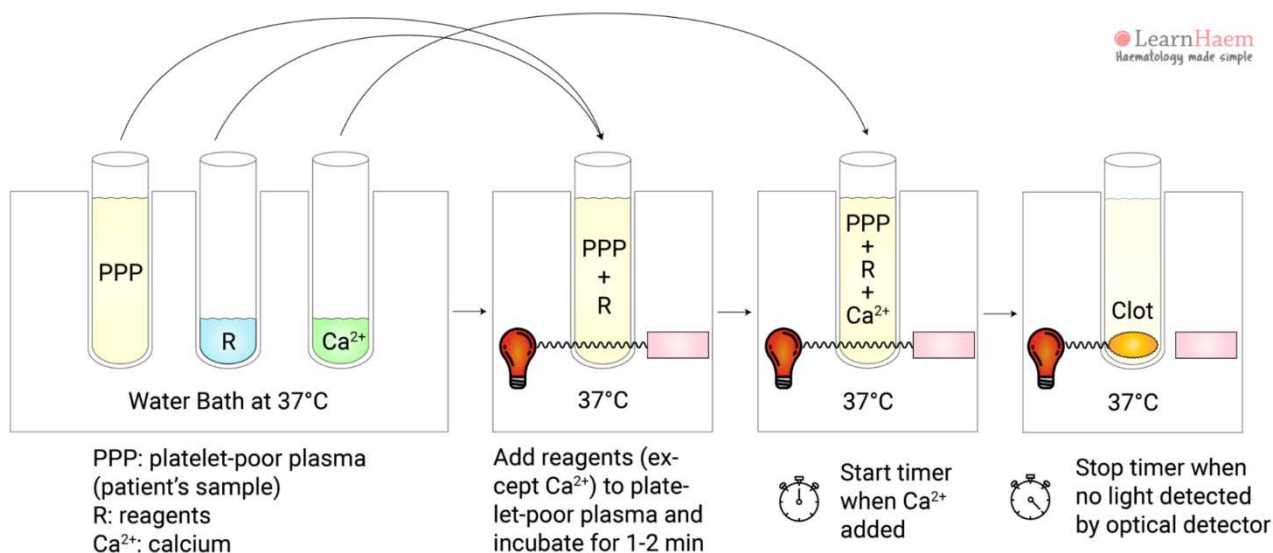




- **Water Bath at 37°C** — Водяна баня при 37°C
- **PPP (platelet-poor plasma)** — Бідна на тромбоцити плазма
- **R (reagents)** — Реагенти
- **Ca²⁺ (calcium)** — Кальцій
- **Clot** — Згусток

Опис етапів процесу (знизу зліва направо):

1. **Add reagents (except Ca²⁺) to platelet-poor plasma and incubate for 1-2 min** — Додайте реагенти (крім кальцію) до бідної на тромбоцити плазми та інкубуйте протягом 1-2 хвилин.
2. **Start timer when Ca²⁺ added** — Запустіть таймер у момент додавання кальцію.
3. **Stop timer when no light detected by optical detector** — Зупиніть таймер, коли оптичний детектор перестане фіксувати проходження світла (через помутніння зразка/утворення згустку).